ООО «Современные торговые решения»



# Инструкция по эксплуатации и сборке

# Тумба медицинская по

# ТУ 32.50.30–001–17031631–2019

# ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ТЛ 18.002

Москва, 2026

**Инструкция по эксплуатации и сборке медицинского изделия**

**Тумба медицинская ТЛ 18.002**

**ТУ 32.50.30–001–17031631–2019**

**РУ РЗН 2019/9496**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации тумбы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Тумба медицинская ТЛ 18.002 (далее по тексту — тумба, тумбы) предназначены для хранения медицинских инструментов, реагентов, размещения лабораторных приборов и медицинских изделий.

Условия применения: используется в медицинских учреждениях и лабораториях.

Показания к применению: для проведения процедур и хранения препаратов, медицинских инструментов, реагентов, размещения лабораторных приборов и медицинских изделий.

Побочное действие и противопоказания: не выявлены.

Потенциальные потребители: пациенты и персонал медицинских учреждений, персонал лабораторий.

1.2. Тумба изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С при относительной влажности 45-70%.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры тумбы указаны в таблице 1.

**Таблица 1. ТЛ 18.002**

| Габаритные размеры (±5 мм) | Значение |
|---|---|
| Ширина, мм | 804 |
| Глубина, мм | 604 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес, кг | не более 60 |

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

**Таблица 2.**

| Функциональные размеры (±5 мм) | Размеры (±5 мм) |
|---|---|
| Размеры рабочей плоскости | Длина: 804 мм, Ширина: 604 мм |
| Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости | 850 мм |
| Расстояние от пола до нижней кромки рабочей плоскости | 828 мм |
| Внутренний размер ящиков | Длина: 418 мм, Глубина: 150 мм, Ширина: 273 мм |

2.3. Характеристики:

2.3.1. Тумба изготовлена в виде сборно-разборной конструкции с использованием ламинированной ДСП с кромкой из ПВХ, ламинированного ХДФ.
2.3.2. Столешница тумбы выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 25 кгс.
2.3.3. Тумба должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку на столешницу 25 кгс, на дно ящика, полки — 10 кгс.
2.3.4. Тумба установлена на металлический каркас, покрытый полимерно-порошковой краской и регулируемый по высоте.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки тумбы соответствует указанному в таблице 3.

**Таблица 3.**

| № | Наименование комплектующего | Количество, шт. | Размеры (±5 мм) |
|---|---|---|---|
| 1 | Столешница | 1 | 804x604x22 |
| 2 | Крышка/Дно | 2 | 678x500x16 |
| 3 | Бок | 2 | 600x500x16 |
| 4 | Средняя стойка | 1 | 568x484x16 |
| 5 | Вкладная полка | 1 | 328x480x16 |
| 6 | Дверь | 1 | 596x352x16 |
| 7 | Бок ящика | 6 | 450x150x16 |
| 8 | Стяжка ящика | 6 | 273x150x16 |
| 9 | Фасад ящика | 3 | 197x352x16 |
| 10 | Дно ящика ХДФ | 3 | 446x301x3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Задник | 1 | 568x678x16 |
| 12 | Опора металлическая | 2 | 798x580x25 |
| 13 | Подстолье металлическое | 1 | 710x580x25 |
| 14 | Экран металлический | 1 | 710x540x25 |
| 15 | Стяжка-усилитель металлическая | 1 | 710x25x25 |
| 16 | Евровинт 7x50 мм | 42 | |
| 17 | Эксцентриковая стяжка | 12 | |
| 18 | Шуруп 3,5x16 мм | 42 | |
| 19 | Гвоздь | 45 | |
| 20 | Комплект роликовых направляющих 450 мм | 3 | |
| 21 | Ручка-скоба хром 96 мм | 4 | |
| 22 | Винт для ручки 4x20 мм с потайной головкой | 8 | |
| 23 | Петля накладная | 2 | |
| 24 | Полкодержатель | 4 | |
| 25 | Болт 6x12 мм | 4 | |
| 26 | Болт 10x60 мм | 2 | |
| 27 | Болт мебельный 8x50 мм | 8 | |
| 28 | Болт мебельный 8x60 мм | 8 | |
| 29 | Гайка М8 | 16 | |
| 30 | Шайба М8 | 16 | |
| 31 | Регулируемая опора М10 | 4 | |
| 32 | Инструкция по эксплуатации и сборке | 1 | А4 |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Тумба со створкой, за створкой располагается полка, и тремя выдвижными ящиками установлена на металлический каркас, покрытый полимерно-порошковой краской и регулируемый по высоте.

4.2. Тумба собрана из элементов, выполненных из ламинированного ДСП с кромкой из ПВХ, ламинированного ХДФ.

4.3. Тумба представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.

4.4. Элементы тумбы закреплены относительно друг друга с помощью эксцентриковых стяжек, евровинтов, металлических и пластиковых уголков, шурупов, винтов, гвоздей, петель и направляющих (для ящика и выдвижных полок).

4.5. Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.

## 5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (отверткой).

6.2. Тумбу, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

## 7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
7.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
7.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.
7.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°С до +35°С при относительной влажности 45-70%.

**Рекомендуется:** удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с
применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора
«Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.
**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода тумбы в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие, или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ТЛ 18.002

Дата выпуска Апрель 2026 М. П.

Соответствует **ТУ 32.50.30–001–17031631–2019** и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку_____

## 10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие_____-_____

наименование и тип изделия

_____

_____

дата выпуска

_____

номер ТУ

Приобретено_____

дата, подпись, штамп торгующей организации

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Современные торговые решения»**

Юридический адрес: 108807, город Москва, Филимонковский район, поселок Птичное, ул. Центральная, д. 1, оф. 24

Место производства: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, лесничество Малинское, квартал 56


Тел.: +7 (495) 480-05-95

E-mail: info@optmebel.ru www.optmebel.ru

**ТУМБЫ ТЛ 18.002**

Инструкция по сборке:

1.1 Сборка каркаса:

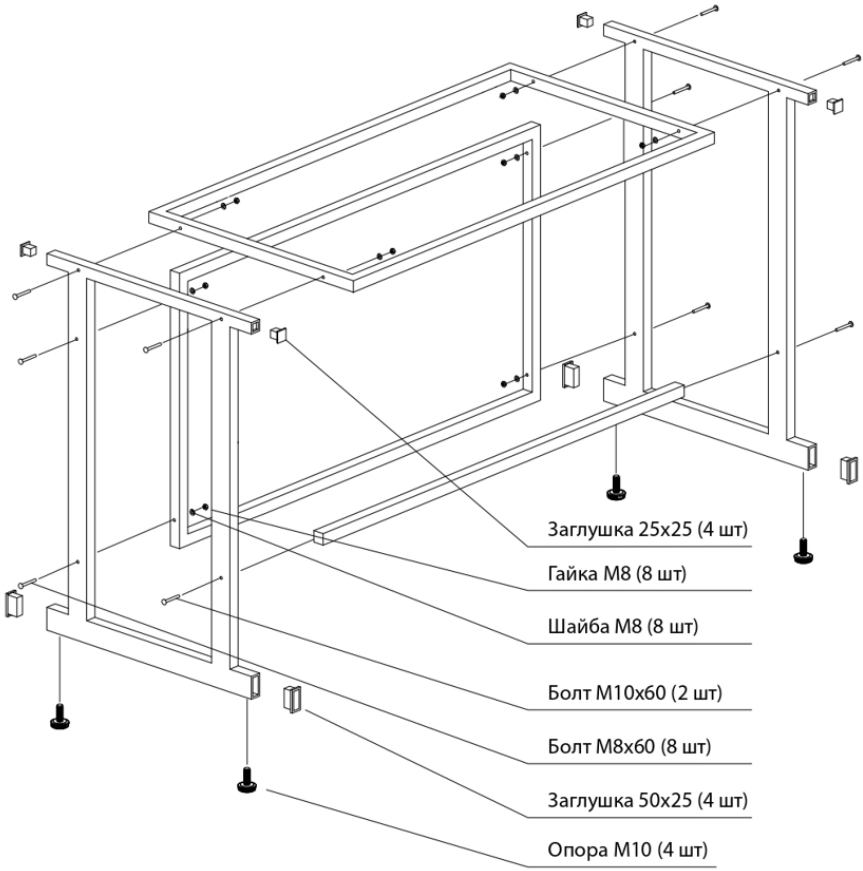



- При помощи мебельных болтов 8х60 мм, гаек и шайб соедините металлические опоры тумбы с экраном и подстольем.

- При помощи болтов 10х60 мм установите стяжку-усилитель.

- Вкрутите регулируемые опоры М10 в опоры стола.

- При помощи болтов 6х12 мм, используя насадку 10 мм, закрепите столешницу к подстолью в предустановленные футорки.

1.2 Сборка ящика (3 шт.):

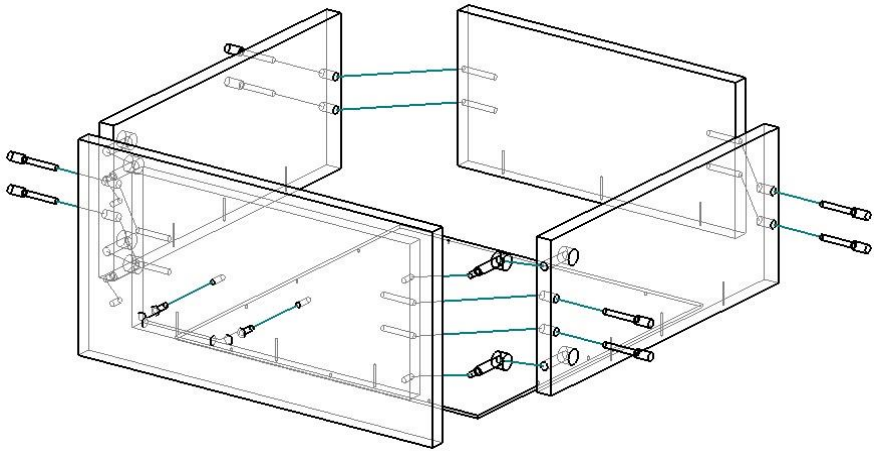

- На фасад с тыльной стороны установите штоки эксцентриковых стяжек и прикрутите ручку.

- Соедините бока ящика с фронтальными стяжками при помощи евровинтов.


- Прибейте дно ящика при помощи гвоздей ко всем четырем бокам ящика.

- В бока ящика установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.

- Соедините корпус ящика с фасадом и затяните эксцентриковые стяжки путём поворота эксцентриков по часовой стрелке до упора.


- При помощи шурупов 3,5х16 мм прикрутите направляющие на бока ящика.

1.3 Сборка тумбы:

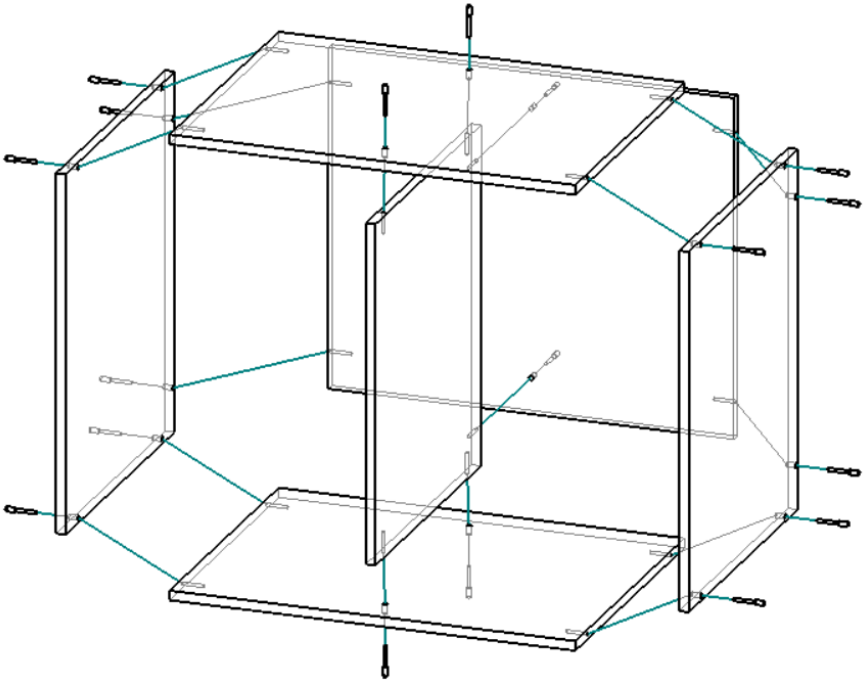

- При помощи шурупов 3,5х16 мм прикрутите направляющие ящиков на указанные метки в **продольные регулировочные** отверстия на левый бок и среднюю стойку.

- При помощи евровинтов соедините бока и среднюю стойку тумбы с дном, крышкой и задником.

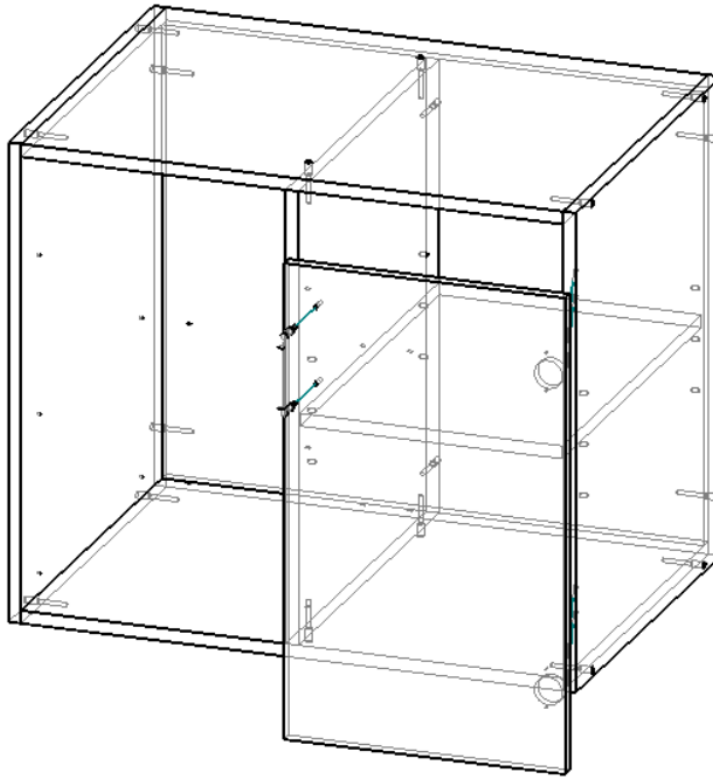

- При помощи шурупов 3,5х16 мм установите петли на дверь.

- При помощи шурупов 3,5х16 мм установите дверь на правый бок тумбы на указанные метки.

- Прикрутите ручку на дверь тумбы при помощи винтов 4х20 мм.

- Отрегулируйте зазоры двери при помощи регулировки петель.

- Установите выдвижные ящики на направляющие в левую нишу.

- Отрегулируйте зазоры между ящиками путем перемещения направляющих на боках тумбы вверх, или вниз при помощи постукивания молотком.

- После регулировки **зафиксируйте** направляющие на боках тумбы в фиксирующие отверстия при помощи шурупов 3,5х16 мм.

- Установите выдвижные ящики на место.

- Установите полкодержатели на бок тумбы и среднюю стойку в правой нише.

- Установите вкладную полку на полкодержатели.

1.4 Навешивание тумбы:

- Вставьте собранную тумбу внутрь каркаса. Если тумба не устанавливается в каркас, то ослабьте сборочные болты каркаса и немного раздвиньте опоры каркаса в сторону.

- При помощи мебельных болтов 8х50 мм, гаек и шайб закрепите тумбу к каркасу.

- Тумба крепится четырьмя болтами с задней стороны и по два болта со стороны опор.