ООО «Современные торговые решения»



Инструкция по эксплуатации и сборке

Стол медицинский по

ТУ 32.50.30–003–17031631–2019

СТОЛ-ТУМБА С НАДСТРОЙКОЙ СТл 18.010

Москва, 2026

Инструкция по эксплуатации и сборке медицинского изделия

Стол-тумба с надстройкой СТл 18.010

ТУ 32.50.30–003–17031631–2019

РУ РЗН 2020/11475

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Стол-тумба с надстройкой СТл 18.010 (далее по тексту — стол, столы) предназначены для хранения медицинских инструментов, реагентов, проведения медицинских исследований, размещения лабораторных приборов, посуды и медицинских изделий.

Условия применения: используется в медицинских учреждениях и лабораториях.

Показания к применению: для проведения процедур и хранения препаратов.

Побочное действие и противопоказания: не выявлены.

Потенциальные потребители: пациенты и персонал медицинских учреждений, персонал лабораторий.

1.2. Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +40°С при относительной влажности 45-70%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблице 1.

Таблица 1. СТл 18.010

Габаритные размеры (±5 мм)	Значение
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	600
Высота, мм	850 (1600)
Вес, кг	не более 115

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Функциональные размеры (±5 мм)	Размеры (±5 мм)
Размеры рабочей плоскости	Длина: 1200 мм, Ширина: 600 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости	850 мм
Расстояние от пола до нижней кромкой рабочей плоскости	828 мм
Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости надстройки	1600 мм
Расстояние между опорами стола	1010 мм
Размер тумбы внутренний	Длина: 1076 мм, Ширина: 484 мм, Высота: 688 мм
Внутренние размеры ящика	Длина: 418 мм, Глубина: 150 мм, Ширина: 290 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Стол изготовлен в виде сборно-разборной конструкции с использованием ламинированной ДСП с кромкой из ПВХ, ламинированного ХДФ, металлического каркаса.
2.3.4. Полки стола выдерживают равномерно распределенную нагрузку массой не более 10 кгс.
2.3.5. Стол должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку на дно ящика, полки — 10 кгс.
2.3.6. Стол установлен на 4 регулируемые по высоте опоры, высотой 50 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры (±5 мм)
1	Столешница	1	1200x600x22
2	Крышка/Дно	2	1076x500x16
3	Бок	2	720x500x16
4	Средняя стойка	1	688x484x16

5	Вкладная полка большая	1	709x480x16
6	Дверь	2	716x366x16
7	Задник	1	688x1076x16
8	Бок ящика	6	450x150x16
9	Стяжка ящика	6	290x150x16
10	Фасад ящика левый	3	237x366x16
11	Дно ящика ХДФ	3	446x318x3
12	Крышка надстройки	1	1200x254x16
13	Бок надстройки	2	734x250x16
14	Средняя стойка надстройки	1	734x232x16
15	Задник надстройки	1	734x1164x16
16	Вкладная полка надстройки	2	571x230x16
17	Опора металлическая	2	798x580x25
18	Подстолье металлическое	1	1110x580x25
19	Экран металлический	1	1110x660x25
20	Стяжка-усилитель металлическая	1	1110x490x25
21	Евровинт 7x50 мм	42	
22	Эксцентриковая стяжка	30	
23	Шкант 8x30 мм	16	
24	Шуруп 3,5x16 мм	52	
25	Гвоздь	45	
26	Комплект роликовых направляющих 450 мм	3	
27	Ручка-скоба хром 96 мм	5	
28	Винт для ручки 4x20 мм с потайной головкой	10	
29	Петля накладная	2	
30	Петля полунакладная	2	
31	Полкодержатель	12	
32	Болт 6x12 мм	8	
33	Болт мебельный 8x50 мм	4	
34	Болт мебельный 8x60 мм	12	
35	Гайка М8	16	
36	Шайба М8	16	
37	Регулируемая опора М10	4	
38	Инструкция по эксплуатации и сборке	1	А4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стол установлен на регулируемые по высоте опоры.

4.2. Стол собран из элементов, выполненных из ламинированного ДСП с кромкой из ПВХ, ламинированного ХДФ, имеет металлический каркас.

4.3. Стол представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.

4.4. Элементы стола закреплены относительно друг друга с помощью эксцентриковых стяжек, евровинтов, металлических и пластиковых уголков, шурупов, винтов, гвоздей, петель и направляющих (для ящика и выдвижных полок).

4.5. Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (отверткой).

6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
7.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая

возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

7.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

7.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°С до +40°С при относительной влажности 45-70%.

Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с
применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора
«Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

Не допускается: механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие, или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СТОЛ-ТУМБА С НАДСТРОЙКОЙ СТл 18.010

Дата выпуска Май 2026 М. П.

Соответствует **ТУ 32.50.30–003–17031631–2019** и признан годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку_____

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие_____-_____

наименование и тип изделия

_____

_____

дата выпуска

_____

номер ТУ

Приобретено_____

дата, подпись, штамп торгующей организации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Современные торговые решения»**

Юридический адрес: 108807, город Москва, Филимонковский район, поселок Птичное, ул. Центральная, д. 1, оф. 24

Место производства: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, лесничество Малинское, квартал 56


Тел.: +7 (495) 480-05-95

E-mail: info@optmebel.ru www.optmebel.ru

СТОЛ-ТУМБА СТл 18.010

Инструкция по сборке:

1.1 Сборка каркаса:

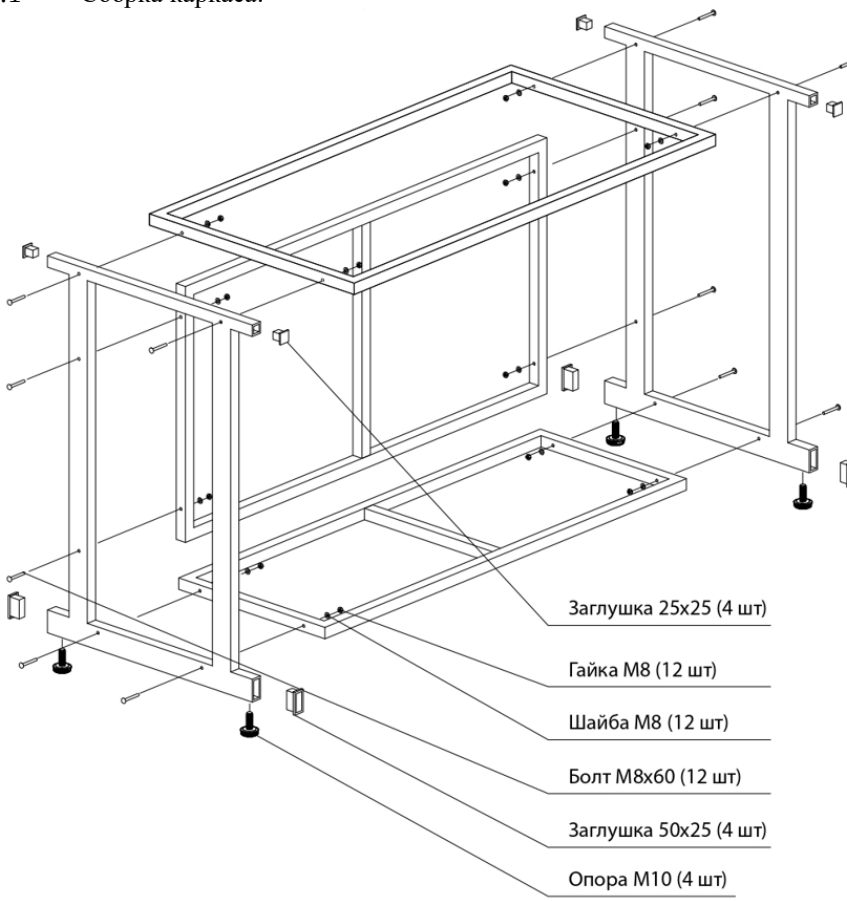


- При помощи мебельных болтов 8х60 мм, гаек и шайб соедините металлические опоры стола с экраном, подстольем и нижней стяжкой-усилителем.

- Вкрутите регулируемые опоры М10 в опоры стола.

- При помощи болтов 6х12 мм, используя насадку 10 мм, закрепите столешницу к подстолью в предустановленные футорки.

1.2 Сборка ящика (3 шт.):

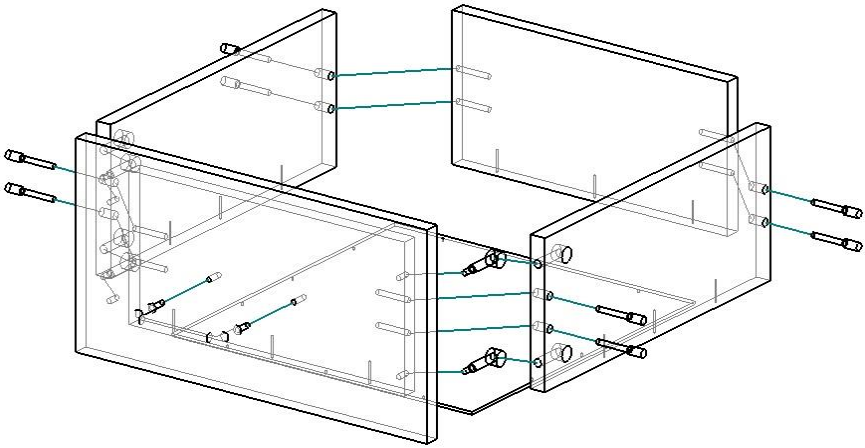

- На фасад с тыльной стороны установите штоки эксцентриковых стяжек и прикрутите ручку.

- Соедините бока ящика с фронтальными стяжками при помощи евровинтов.


- Прибейте дно ящика при помощи гвоздей ко всем четырем бокам ящика.

- В бока ящика установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.

- Соедините корпус ящика с фасадом и затяните эксцентриковые стяжки путём поворота эксцентриков по часовой стрелке до упора.


- При помощи шурупов 3,5х16 мм прикрутите направляющие на бока ящика.

1.3 Сборка тумбы:

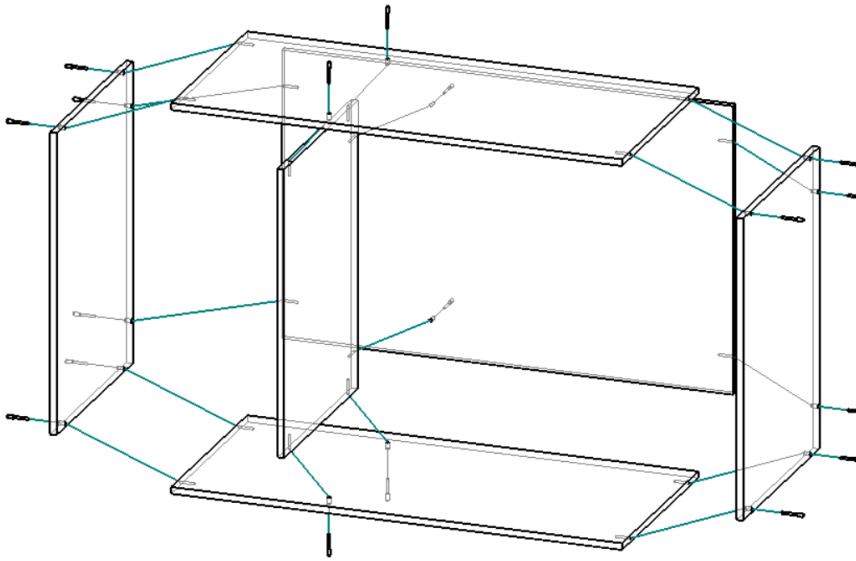

- При помощи шурупов 3,5х16 мм прикрутите направляющие ящиков на указанные метки в **продольные регулировочные** отверстия на левый бок и среднюю стойку.

- При помощи евровинтов соедините бока и среднюю стойку тумбы с дном, крышкой и задником.

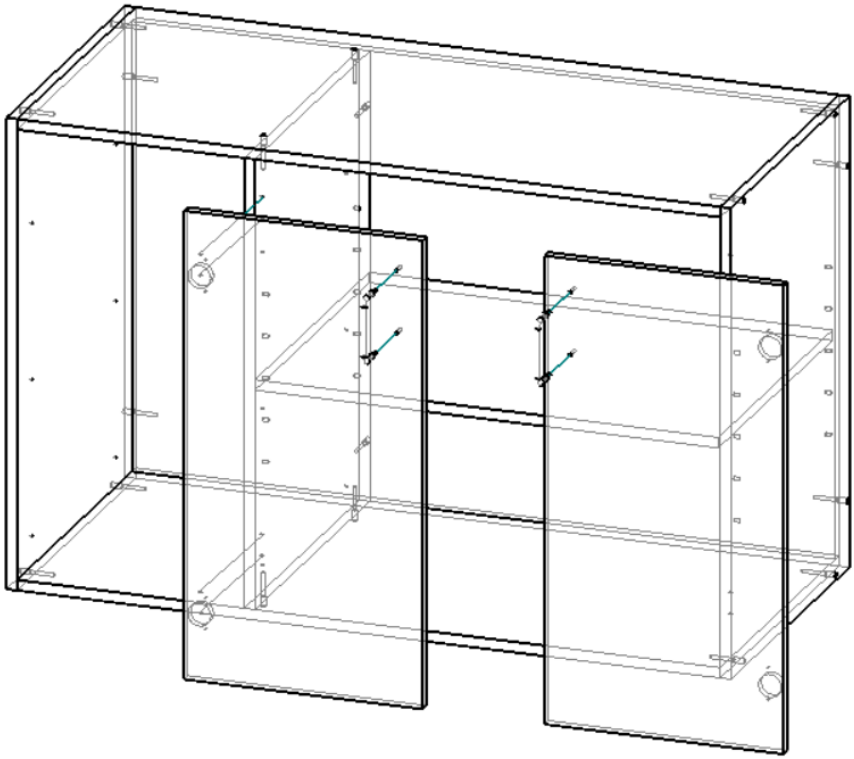

- При помощи шурупов 3,5х16 мм установите петли на двери. **На среднюю дверь устанавливаются полунакладные петли.**

- При помощи шурупов 3,5х16 мм установите двери на бока и среднюю стойку тумбы на указанные метки.

- Прикрутите ручки на двери тумбы при помощи винтов 4х20 мм.

- Отрегулируйте зазоры дверей при помощи регулировки петель.

- Установите выдвижные ящики на направляющие в левую нишу.

- Отрегулируйте зазоры между ящиками путем перемещения направляющих на боках тумбы вверх, или вниз при помощи постукивания молотком.

- После регулировки **зафиксируйте** направляющие на боках тумбы в фиксирующие отверстия при помощи шурупов 3,5х16 мм.

- Установите выдвижные ящики на место.

- Установите полкодержатели на правый бок тумбы и среднюю стойку.

- Установите вкладную полку на полкодержатели.


1.4 Установка тумбы:

- Вставьте собранную тумбу внутрь каркаса.

- При помощи мебельных болтов 8х50 мм, гаек и шайб закрепите тумбу к каркасу с задней стороны.

- При помощи болтов 6х12 мм, используя насадку 10 мм, закрепите дно тумбы к стяжке-усилителю снизу в предустановленные футорки.

1.5 Сборка надстройки:

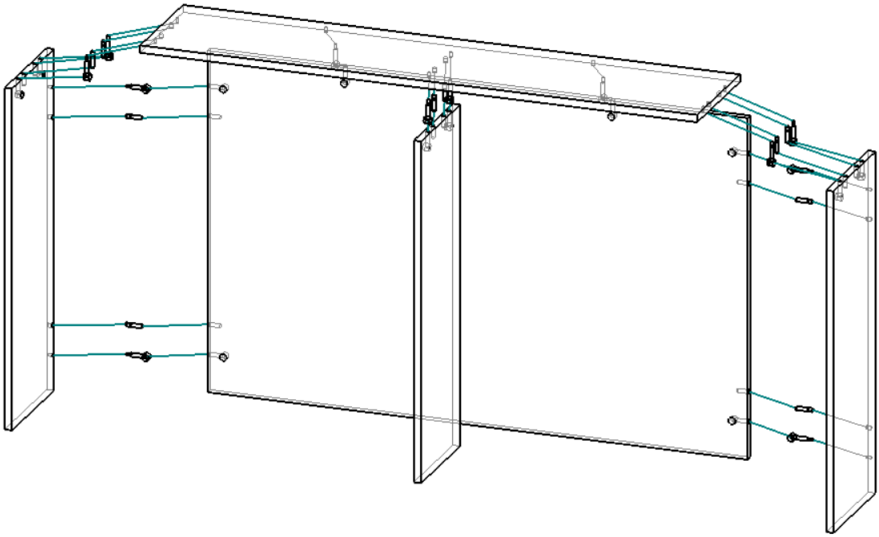

- На бока надстройки установите штоки эксцентриковых стяжек и деревянные шканты для соединения с задником надстройки.

- В задник надстройки установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.


- Соедините бока с задником и затяните эксцентриковые стяжки по часовой стрелке до упора.

- На крышку надстройки с нижней стороны установите штоки эксцентриковых стяжек и шканты.

- В бока и среднюю стойку надстройки установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.

- Соедините крышку боками и средней стойкой и затяните эксцентриковые стяжки по часовой стрелке до упора.

1.6 Установка надстройки:

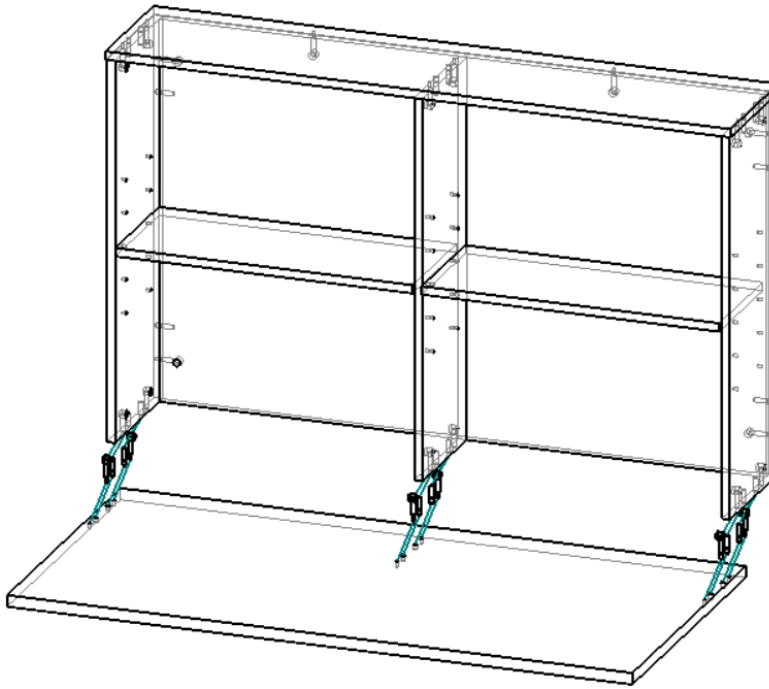

- На верхнюю часть столешницы установите штоки эксцентриковых стяжек и деревянные шканты.

- В бока и среднюю стойку надстройки установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.

- Установите надстройку сверху стола и затяните эксцентриковые стяжки путём поворота эксцентриков по часовой стрелке до упора.

- Установите полкодержатели на бока и среднюю стойку надстройки.

- Установите вкладные полки на полкодержатели.