ООО «Современные торговые решения»



# Инструкция по эксплуатации и сборке

# Стол медицинский по

# ТУ 32.50.30–003–17031631–2019

# СТОЛ ДЛЯ КАБИНЕТА СЛ 12.020

Москва, 2024

**Инструкция по эксплуатации и сборке медицинского изделия**

**Стол для кабинета СЛ 12.020**

**ТУ 32.50.30–003–17031631–2019**

**РУ РЗН 2020/11475**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Стол для кабинета СЛ 12.020 (далее по тексту — стол, столы) предназначены для хранения медицинских инструментов, реагентов, проведения медицинских исследований, размещения лабораторных приборов, посуды и медицинских изделий.

Условия применения: используется в медицинских учреждениях и лабораториях.

Показания к применению: для проведения процедур и хранения препаратов.

Побочное действие и противопоказания: не выявлены.

Потенциальные потребители: пациенты и персонал медицинских учреждений, персонал лабораторий.

1.2. Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +40°С при относительной влажности 45-70%.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблице 1.

**Таблица 1. СЛ 12.020**

| Габаритные размеры (±5 мм) | Значение |
|---|---|
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес, кг | не более 73 |

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

**Таблица 2.**

| Функциональные размеры (±5 мм) | Размеры (±5 мм) |
|---|---|
| Размеры рабочей плоскости | Длина: 1500 мм, Ширина: 600 мм |
| Расстояние от пола до верхней кромки рабочей плоскости | 850 мм |
| Расстояние от пола до нижней кромки рабочей плоскости | 828 мм |
| Расстояние между опорами стола | 620 мм |
| Размер тумбы внутренний | Длина: 368 мм, Ширина: 502 мм, Высота: 664 мм |
| Размер полки в тумбе | Длина: 365 мм, Ширина: 500 мм |
| Расстояние между полкой и дном тумбы | 422 мм |
| Расстояние между полкой и крышкой тумбы | 226 мм |
| Внутренние размеры ящика | Длина: 418 мм, Глубина: 150 мм, Ширина: 310 мм |

2.3. Характеристики:

2.3.1. Стол изготовлен в виде сборно-разборной конструкции с использованием ламинированной ДСП с кромкой из ПВХ, ламинированного ХДФ, металлического каркаса.
2.3.4. Полки стола выдерживают равномерно распределенную нагрузку массой не более 10 кгс.
2.3.5. Стол должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку на дно ящика, полки — 10 кгс.
2.3.6. Стол установлен на 6 регулируемых по высоте опор, высотой 50 мм.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 3.

**Таблица 3.**

| № | Наименование комплектующего | Количество, шт. | Размеры (±5 мм) |
|---|---|---|---|
| 1 | Столешница | 1 | 1500x600x22 |
| 2 | Экран | 1 | 680x620x16 |
| 3 | Бок тумбы | 4 | 680x520x16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Дно | 2 | 368x520x16 |
| 5 | Задник тумбы | 2 | 664x368x16 |
| 6 | Полка силовая тумбы | 2 | 368x502x16 |
| 7 | Бок ящика | 4 | 450x150x16 |
| 8 | Фронтальная стяжка ящика | 4 | 310x150x16 |
| 9 | Фасад ящика | 2 | 224x396x16 |
| 10 | Дно ящика ХДФ | 2 | 446x338x3 |
| 11 | Полка вкладная тумбы | 1 | 365x500x16 |
| 12 | Дверь тумбы | 1 | 450x396x16 |
| 13 | Усиливающая планка | 1 | 80x620x16 |
| 14 | Металлическая опора | 6 | 802x25x25 |
| 15 | Евровинт 7x50 мм | 24 | |
| 16 | Эксцентриковая стяжка | 40 | |
| 17 | Шкант 8x30 мм | 28 | |
| 18 | Гвоздь | 30 | |
| 19 | Шуруп 3,5x16 мм | 32 | |
| 20 | Комплект роликовых направляющих 450 мм | 2 | |
| 21 | Петля накладная | 2 | |
| 22 | Полкодержатель | 4 | |
| 23 | Ручка-скоба хром 96 мм | 3 | |
| 24 | Винт для ручки с потайной головкой 4x20 мм | 6 | |
| 25 | Болт мебельный 8x50 мм | 12 | |
| 26 | Гайка М8 | 12 | |
| 27 | Шайба М8 | 12 | |
| 28 | Регулируемая опора М10 | 6 | |
| 29 | Инструкция по эксплуатации и сборке | 1 | А4 |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стол установлен на регулируемые по высоте опоры.

4.2. Стол собран из элементов, выполненных из ламинированного ДСП с кромкой из ПВХ, ламинированного ХДФ, имеет металлический каркас.

4.3. Стол представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.

4.4. Элементы стола закреплены относительно друг друга с помощью эксцентриковых стяжек, евровинтов, металлических и пластиковых уголков, шурупов, винтов, гвоздей, петель и направляющих (для ящика и выдвижных полок).

4.5. Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.

## 5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

5.1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (отверткой).

6.2. Стол, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

## 7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
7.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
7.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.
7.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные

условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°С до +40°С при относительной влажности 45-70%.
**Рекомендуется:** удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с
применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора
«Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.
**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода стола в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие, или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СТОЛ ДЛЯ КАБИНЕТА СЛ 12.020

Дата выпуска Октябрь 2024 М. П.

Соответствует **ТУ 32.50.30–003–17031631–2019** и признан годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку_____

## 10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие_____-_____

наименование и тип изделия

_____

_____

дата выпуска

_____

номер ТУ

Приобретено_____

дата, подпись, штамп торгующей организации

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Современные торговые решения»**

Юридический адрес: 143396, г. Москва, п. Первомайское, пос. Птичное, ул. Центральная, дом 1, оф. 24.

Место производства: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, лесничество Малинское, квартал 56

Тел.: +7 (495) 480-84-51


E-mail: info@optmebel.ru www.optmebel.ru

**СТОЛ ДЛЯ КАБИНЕТА СЛ 12.020**

Инструкция по сборке:

1.1 Сборка стола:

Тумбы **2 шт.**

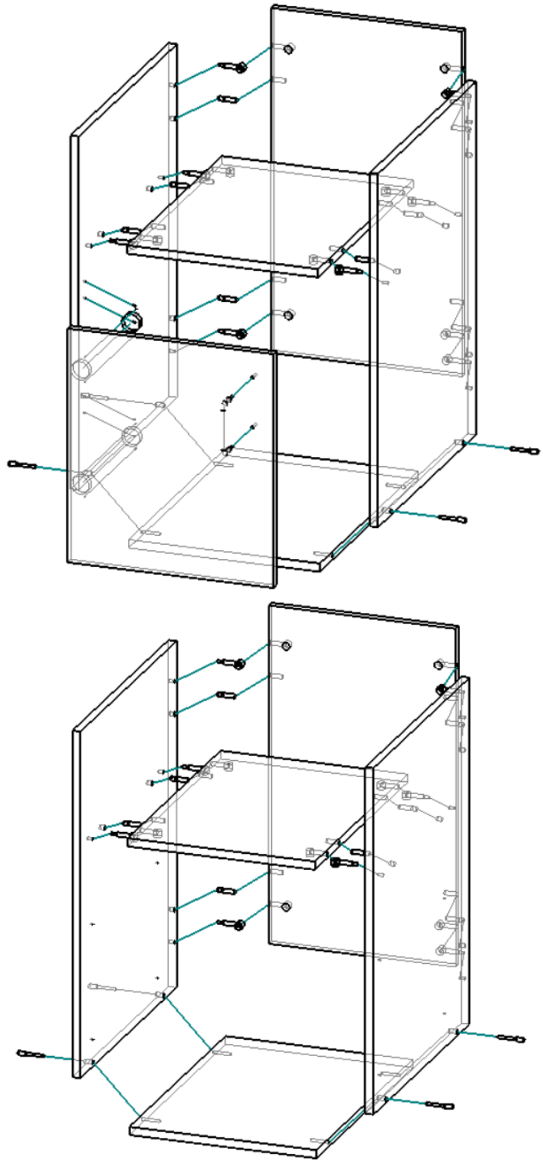

- При помощи шурупов 3,5х16 мм прикрутите направляющие ящиков на указанные метки на боках правой тумбы в **продольные** регулировочные отверстия.

- На бока тумб установите штоки эксцентриковых стяжек и деревянные шканты для соединения с задней стенкой и силовой полкой.


- Установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек в задник тумбы и силовую полку.

- Соедините бока с задником и силовой полкой и затяните эксцентриковые стяжки путём поворота эксцентриков по часовой стрелке до упора.

- При помощи евровинтов закрепите дно тумбы к получившейся конструкции.

- При помощи шурупов 3,5х16 мм установите петли на дверь. Прикрутите шурупами дверь к левой тумбе на указанные метки.


- Установите ручку на дверь при помощи винтов 4х20 мм.

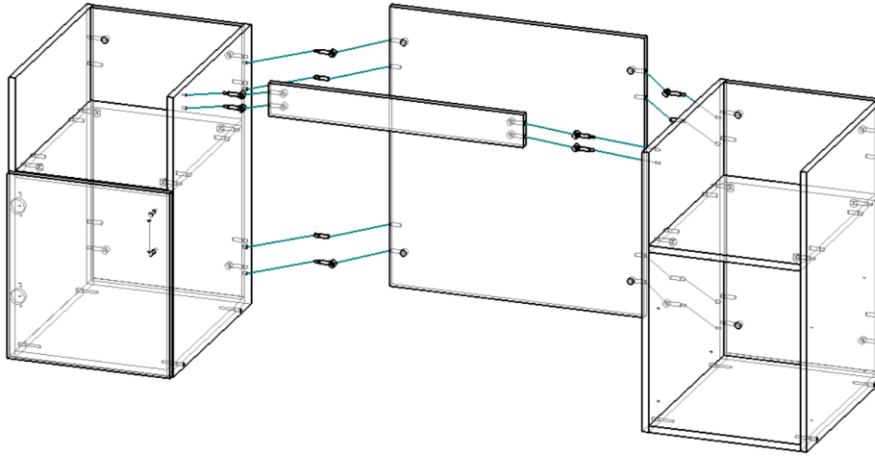

- На бока тумб установите штоки эксцентриковых стяжек и шканты для соединения с экраном стола и усиливающей планкой.

- В экран стола и усиливающую планку установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.

- Соедините тумбы с экраном и усиливающей планкой и затяните все эксцентриковые стяжки по часовой стрелке до упора.

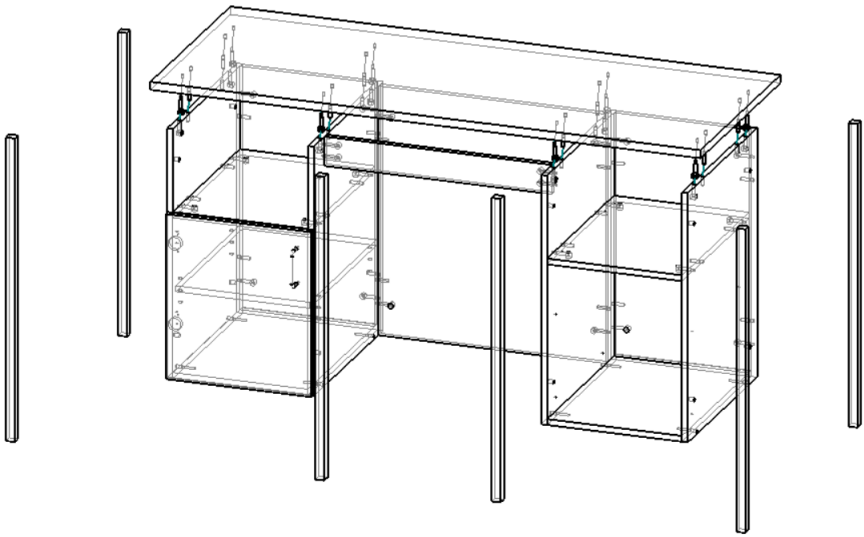

- На столешницу с нижней стороны установите штоки эксцентриковых стяжек и шканты.

- В бока тумб установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек.

- Соедините столешницу с подстольем и затяните эксцентриковые стяжки по часовой стрелке до упора.

- При помощи мебельных болтов 8х50 мм, гаек и шайб соедините металлические опоры стола с опорами из ЛДСП. Металлические опоры устанавливаются с наружной части опор из ЛДСП, там, где отсутствуют глухие отверстия под эксцентриковую стяжку.

- Вкрутите регулируемые опоры снизу металлических опор.

- Установите выдвижные ящики на направляющие в правой тумбе.

- Отрегулируйте зазоры между ящиками путем перемещения направляющих на боках тумбы вверх, или вниз при помощи постукивания молотком.

- После регулировки **зафиксируйте** направляющие на боках тумбы в фиксирующие отверстия при помощи шурупов 3,5х16 мм.

- Установите выдвижные ящики на место.

- Отрегулируйте зазоры двери в левой тумбе при помощи регулировки петель.

- Установите полкодержатели в отверстия на боках левой тумбы.

- Установите вкладную полку на полкодержатели.